


CLARADENT Presenta: ÖkoCleaner

Una herramienta de pulido alternativa para finalización en la profilaxis, reparación y rellenos.

ESPECTRO DE USO: PROFILAXIS.

- Finalización tras escalamiento y limpieza con ultra sonido.
- Alisado radicular subgingival sin irritación de los tejidos blandos.
- Paro figuras = Formas especiales para bifurcaciones **2505** y **2506**
- Para pacientes sensibles esta es una alternativa suave al airbrush, especialmente en el área cervical.
- Perfecta profilaxis en pacientes de ortodoncia - limpieza alrededor de los brackets **2501**
- Acabado de la eliminación de residuos de adhesivo tras retirar brackets y retainers **2501**, **2504** para área labial y **2502** para área lingual.
- Profilaxis en implantes de titanio **2501**
- Pulido, especialmente en el área aproximal **2501**.
- Retirar el exceso de cemento cuando se colocan inlays.

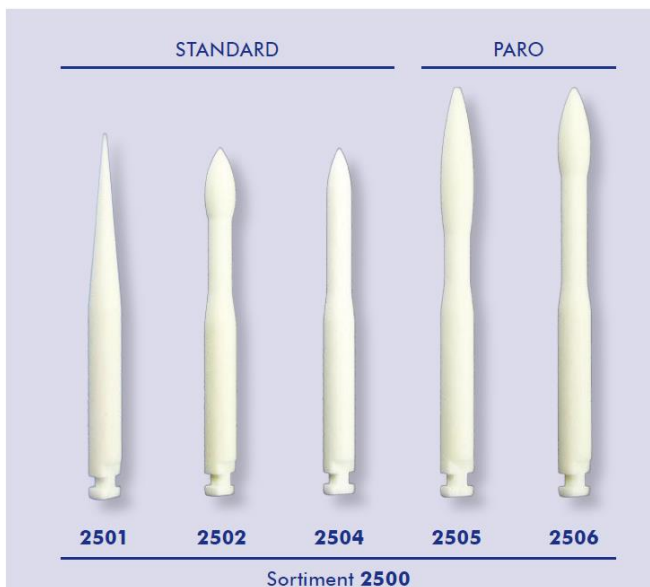

PROPIEDADES:

- Instrumentos auto afilados por la continua abrasión.
- No abrasivos con el esmalte y la cerámica.
- Tratamiento suave de la dentina cemento radicular y composite.
- Desliza en los tejidos blandos.

APLICACIÓN:

- Para el uso con contra ángulo, y pieza de mano a baja velocidad de rotación: 15.000 rpm
- Trabajar con ligera presión y agua pulverizada.
- Esterilización en autoclave 135°C